


# BE2021 Maxi Pro samtaleforsterker

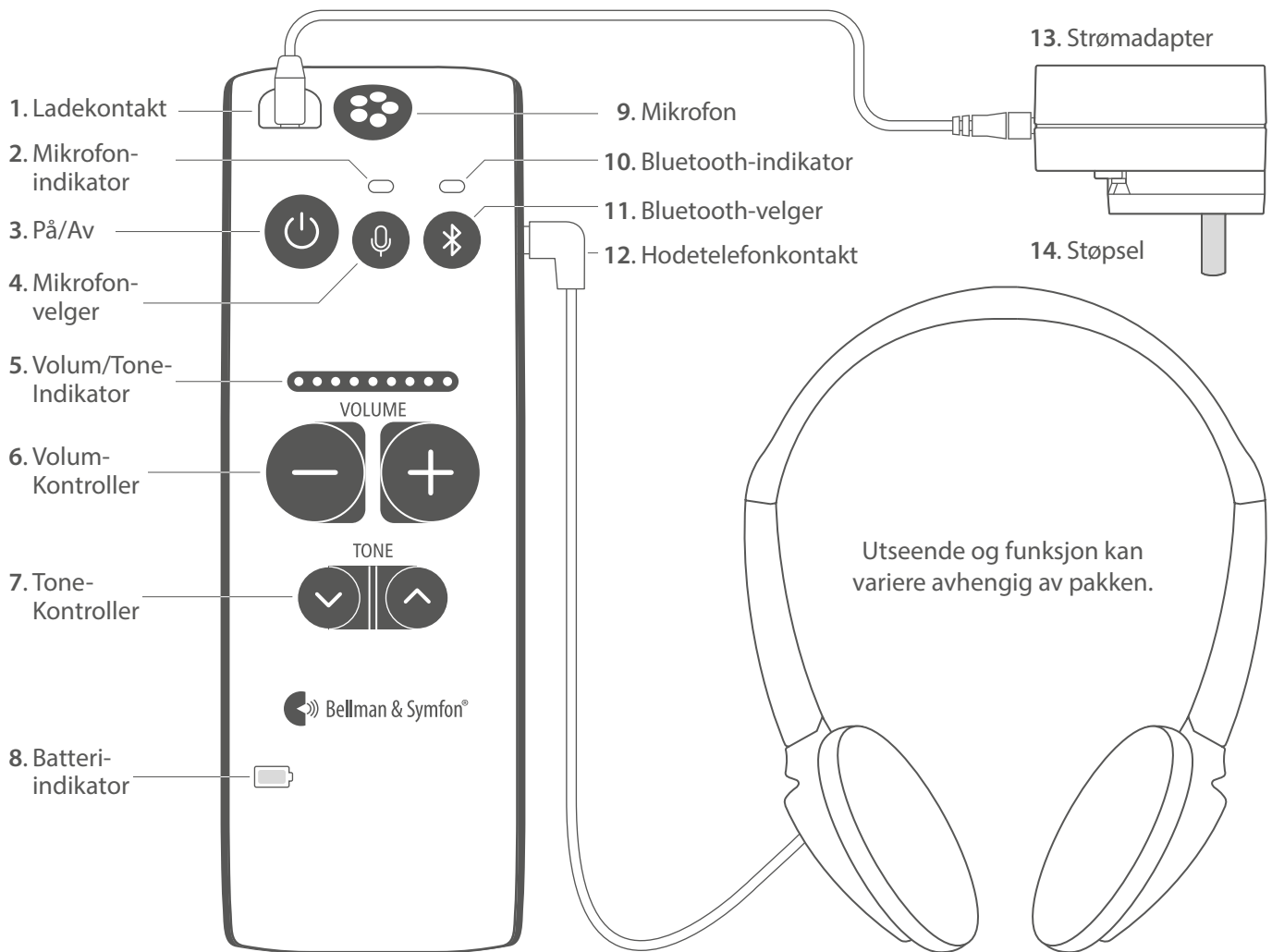

## Om Maxi Pro

Maxi Pro er en digital samtaleforsterker som forsterker ordene slik at du hører de høyt og tydelig. Bruk Maxi til å forsterke samtalen rundt middagsbordet, når du snakker i mobiltelefonen eller når du ser på TV.

## Komme i gang

### Trinn 1: Lade opp Maxi

- 1 Koble ladekabelen til strømadapteren (13) og til Maxi-ladekontakten (1) som er merket med gult.
- 2 Monter støpselet (14) på strømadapteren (13), og kontroller at det sitter som den skal før det kobles til strømtilførselen.
- 3 Batteriindikatoren (8) blinker grønt under lading. Etter ca. 3 timer lyser den med fast, grønt lys for å vise at Maxi-enheten er ferdig ladet.

### Trinn 2: Koble til Maxi

Koble de medfølgende hodetelefonene, ørepluggene, hodesettet eller nakkebøylen til hodetelefon-kontakten (12) som er merket med grønt på Maxi.

### Trinn 3: Starte Maxi

Hold inne på/av-knappen (3) i ca. en sekund for å starte Maxi. Mikrofonindikatoren (2) tennes og lyser grønt, og valgt volum vises av volum-/toneindikatoren (5) i tre sekunder.

Maxi slås av ved å holde inne På/av-knappen (3) i ca. tre sekunder til alle indikatorene slukkes.

## Bruke Maxi til å forsterke tale

Maxi er utstyrt med en innebygd mikrofon (9) som forsterker tale. Sett Maxi på bordet nær personen som snakker, hold den i hånden eller fest den på klærne med klemmen.

## Justere volumet

Trykk **+** på volumkontrollen (6) for å øke volumet, og **-** for å redusere det. Mikrofonvolumet kan justeres i 9 trinn, og TV- og mobiltelefonvolum kan justeres 15 trinn. Nivået vises på volum-/toneindikatoren (5).

**Merk:** Volumet er innstilt på lavt volum hver gang du slår på Maxi, for å unngå ubehagelige lydnivåer.

## Justere tonen

Trykk **^** på tonekontrollen (7) for å øke diskantnivået, og på **v** for å redusere det. Diskantnivået kan justeres i 5 trinn, og vises med volum-/tone-indikatoren (5).

**Merk:** En økning i diskanten gjør at lydene S, F og T blir mer fremtredende, og ordene blir lettere å forstå.

# Bruke Maxi med mobiltelefon

## Parkobling

- 1 Sett Maxi-enheten i mikrofonmodus ved å trykke på mikrofonvelgeren (4).
- 2 Hold inne Bluetooth-velgeren (11) på Maxi til Bluetooth-indikatoren (10) begynner å blinke blått.
- 3 Kontroller at Bluetooth er aktivert på mobiltelefonen. Åpne Bluetooth-menyen og velg "Maxi Pro" i listen.
- 4 Bluetooth-indikatoren avgir et fast, blått lys for å vise at parkoblingen var vellykket.

**Merk:** Hvis mobiltelefonen er koblet fra Maxi-enheten, må enhetene kobles sammen igjen ved å gjenta trinn 3 og 4.

## Besvare en telefonoppringning

- 1 Bluetooth-indikatoren (10) på Maxi blinker blått når mobiltelefonen ringer. Alle andre lyder blir dempet, og du hører ringesignalet i hodetelefonene.
- 2 Anropet **besvares** ved å trykke på Bluetoothvelgeren (11) på Maxi eller bruke fjernkontrollen på hodetelefonene. Deretter hører du oppringerens stemme forsterket i hodetelefonene. Stemmen din blir fanget opp av mikrofonen på Maxi eller fjernkontrollen på hodetelefonene.
- 3 Trykk en gang til på Bluetooth-velgeren på Maxi for å **legge på**.

**Merk:** Hvis du vil **avvise** et innkommende anrop, holder du inne Bluetooth-velgeren på Maxi i 3 sekunder.

## Ring opp

Når du snakker i mobiltelefonen, vil du høre mottakerens stemme forsterket i hodetelefonene. Stemmen din blir fanget opp av mikrofonen på Maxi-enheten.

## Strømme musikk

Spill av en sang på mobiltelefonen, og trykk på Bluetooth-velgeren (11) på Maxi til du hører musikken.

## Bruke et headset med mikrofon

Når du snakker i telefonen, blir lyden fanget opp av mikrofonen i fjernkontrollen på hodetelefonene i stedet for mikrofonen på Maxi.

# Bruke Maxi til å høre TV-lyd

For å kunne strømme med lyd fra TV-apparatet, trenger du en Maxi Pro TV streamer. Se egen brukerhåndbok for installeringsanvisninger.

## Høre på TV

Slå på TV-apparatet, velg et program og trykk på Bluetooth-velgeren (11) på Maxi for å høre TV-lyden.

**Merk:** Hvis du får en telefonoppringning mens du ser på TV, dempes lyden fra TV-apparatet slik at du kan høre oppringerens stemme tydelig.

Når du legger på, kommer lyden fra TV-apparatet automatisk tilbake.

## Automatisk tilkobling


Maxi-enheten kobles automatisk til TV streamer så snart den er innenfor rekkevidde, slik at du enkelt kan ta med deg Maxi-enheten når du besøker familie og venner.

# Batteri og lading

Maxi er utstyrt med et innebygd, oppladbart batteri som varer opptil 70 timer. Når batteriindikatoren (8) begynner å blinke rødt, er det på tide å lade den, se **Lade opp Maxi**

# Montere klemmen

Klemmen monteres ved å legge den mot bakdekselet og trykke hardt til den låses fast. Den fjernes ved å trekke de runde håndtakene ut fra sidene.

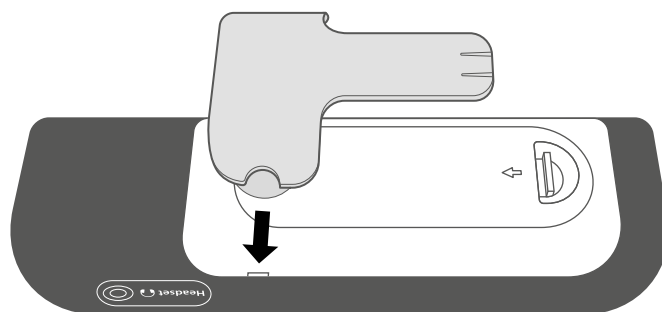

# Feilsøking

De fleste problemer med produktet kan løses raskt ved å følge rådene nedenfor.

Hvis	Prøv dette
Jeg klarer ikke å pare enhetene via Bluetooth.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Påse at Maxi-enheten er i mikrofonmodus ved å trykke på mikrofonvelgeren (4). Forsøk å pare enhetene igjen ved å følge trinnene i avsnittet <b>Paring</b>.</li></ul>
Ingenting skjer når jeg trykker på På/av-knappen på Maxi-enheten.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Batteriene er utladet. Lad Maxi-enheten, se <b>Lade opp Maxi</b>.</li></ul>
Batteriindikatoren på Maxi blinker rødt.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Batterinivået er lavt. Lad Maxi, se <b>Lade opp Maxi</b>.</li></ul>
Jeg hører ingen lyd i hodetelefonene selv om Maxi er slått på.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontroller først at volumet er på riktig nivå. Kontroller at hodetelefonpluggen er riktig koblet til hodetelefonkontakten på Maxi-enheten (12).</li><li>• Øk volumet ved å trykke på <b>+</b> på volumkontrollen (6) på Maxi.</li><li>• Koble hodetelefonene til en annen enhet, for eksempel en smarttelefon, og kontroller om du hører lyd. Hvis ikke, kan det være at hodetelefonene må skiftes.</li><li>• Hvis Bluetooth-modus er valgt, kontrollerer du at TV-streamer eller mobiltelefonen er innenfor rekkevidde, er parkoblet og at lyd strømmes.</li></ul>
Jeg hører ikke mobiltelefonen i hodetelefonene.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontroller at Bluetooth er aktivert på mobiltelefonen, og at den er parkoblet med Maxi. Se <b>Parkobling</b> i avsnittet Bruke Maxi med mobiltelefon.</li></ul>
Jeg hører ikke lyden fra TV-apparatet i hodetelefonene.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontroller at TV-streamer er innenfor rekkevidde og at den er parkoblet med Maxi. Se <b>Parkobling</b> i avsnittet Bruke Maxi til å høre TV-lyd.</li></ul>
Lyden fra TV-apparatet eller mobiltelefonen er for lav, til tross for at volumet på Maxi-enheten er på høyeste nivå.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Forsøk å skru opp volumet på TV-apparatet eller mobiltelefonen.</li></ul>
Jeg hører en høyfrekvent lyd i hodetelefonene.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Reduser volumet eller øk avstanden mellom Maxi og hodetelefonene.</li><li>• Rett den innebygde mikrofonen (9) på Maxi bort fra deg.</li></ul>
Maxi svarer ikke/er frosset.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hold inne av/på-knappen (3) i ti sekunder til Maxi slås av.</li><li>• Hold inne av/på-knappen (3) i en sekund for å starte Maxi igjen.</li></ul>

## Bruke produktet

### Bruke produktet

**Merk:** Maxi Pro kan skape høyt lydnivå. Den må brukes med varsomhet. Øk volumet gradvis til et behagelig nivå. Eksponering for høyt lydnivå kan være skadelig for hørselen din.

Hold små deler utenfor rekkevidde for små barn.

Bruk produktet i et tørt miljø der temperaturen alltid er mellom 0 °C og 35 °C.

### Rengjøring

Rengjør produktet med en myk, lofri klut. Unngå at det kommer fuktighet inn i åpningene.

### Service og garanti


Følg instruksjonene i dette heftet hvis produktet ser ut til å være skadet eller ikke fungerer som det skal. Hvis produktet fortsatt ikke fungerer som det skal, kontakter du den lokale leverandøren for å få informasjon om service og garanti.

# DESIGN FOR EARS™

**Europeisk hovedkontor**

Bellman & Symfon AB  
Södra Långebergsgatan 30  
436 32 Askim  
Sweden  
Phone +46 31 68 28 20  
E-mail [info@bellman.com](mailto:info@bellman.com)

[bellman.com](http://bellman.com)

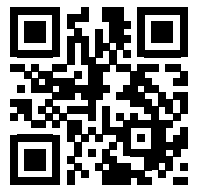

BE2021\_091MAN001-NO